



DrugCheck® es la prueba antidrogas más novedosa, tecnológicamente avanzada y de mayor venta en el mercado en EE.UU., Europa, México y Latinoamérica.

Es sencilla y fácil de usar, siendo la única prueba que no requiere pasos para efectuarse. DrugCheck® es un dispositivo autónomo para colección y examen de muestras de orina, que detecta cualquiera de las siguientes drogas:

- EN SOLAMENTE 5 MINUTOS
- EL FRASCO HACE TODO EL TRABAJO

- * Anfetaminas
- * Barbitúricos
- * Benzodiazepinas
- * Cocaína
- * Marihuana
- * Metanfetaminas
- * Opiáceos
- * Fenciclidina

DrugCheck® está aprobado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA) y la Secretaría de Salud de México (SSA). Este producto es único por su método de detección. Dado que las tiras de detección están aseguradas en el interior del frasco hermético, las cuales trabajan por medio de gravedad, DrugCheck® elimina la necesidad de manejar muestras de orina. Menos manejo significa menos riesgo de contaminación o error y MENOS TIEMPO. Sólo deposite la orina en el frasco y lea los resultados. No requiere llaves ni manipulaciones en el frasco. Cuenta con una tapa de rosca la cual la hace ser muy segura, ya que las tapas de presión suelen ajustarse de manera incorrecta y esto provoca accidentes al destapar.

Otra característica de DrugCheck® es que una vez que se ponga el sello de seguridad en el frasco, las muestras positivas quedan listas para ser enviadas al laboratorio de confirmación, sin tener que transferir muestras en envases separados para el envío. ¡Así los procesos de custodia son simplificados!

Las pruebas DrugCheck® cuentan con una cadena de custodia, sello de seguridad y bolsa de custodia para la muestra; así como servicios de confirmación por espectrometría en caso de que se requiera su confirmación, ésta no tiene costo con nuestra empresa.

Simple. Higiénico. Autónomo. Ningún otro producto ofrece esta facilidad de uso y diseño sencillo. ¡Compare DrugCheck® usted mismo! Dado su precio y eficacia comparado con el resto de pruebas "similares", ¿por qué tendría usted que utilizar otro método?

DrugCheck® es ideal para propósitos de pre-empleo, post-accidente, pruebas al azar, aptitud para laborar y motivo de sospecha.



Bolsa de Custodia

Al realizar la prueba No rompa la bolsa hasta que esté listo para empezar la prueba.

Ventajas

Precisión: Cumple con los niveles de corte recomendados por SAMHSA (*Substance Abuse and Mental Health Services Administration*).

Autónomo: Una muestra positiva puede enviarse en el mismo frasco a un laboratorio de confirmación para análisis de cromatografía de gases / espectrometría de masas (CG/EM). Cada frasco tiene un tiempo de caducidad de 18 meses hasta antes de usarse e incluye una tira de temperatura para verificar la muestra, etiqueta de identificación y sello de seguridad.

Etiqueta de Privacidad: Una etiqueta de lengüeta oculta los resultados de la prueba, para que únicamente personal autorizado pueda leerlos de forma confidencial.


DrugCheck® puede adquirirse en diferentes presentaciones y/o combinaciones para detectar desde 2 hasta 8 drogas simultáneamente, opcionalmente se puede incluir tira para detección de adulterantes.

FÁCIL DE USAR

1. Recoja la orina directamente en el frasco



2. Retire la etiqueta después de 5 minutos

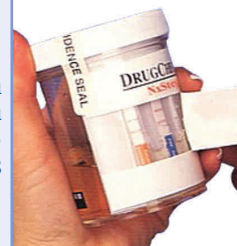

3. Lea los resultados



Sencillo y Fácil de leer

Una línea indica un resultado positivo (+).

Dos líneas indican un resultado negativo (-).

NOTA: No interprete los resultados después de 10 minutos.



Diinsel S.A. de C.V.
 Venezuela 342, Col. Vista Hermosa
 Monterrey, N.L.
 México 64620
 Tel.: (81) 8040-2972 Fax: (81) 8040-2973
 Lada sin Costo: 01-800-777-0010

info@diinsel.com
 info@diinsel.com
 www.diinsel.com

Productos de calidad para su seguridad